

Riktig prøvetaking for *Campylobacter* i Handlingsplanen 2017.

Hver bomullspinne stikkes ned i én fersk avføringskladd på gulvet. Dette skal være blindtarmstømminger som kjennetegnes ved at de er brune avføringskladder uten struktur (partikler) og uten hvite uratkrystaller.

Bomullspinnen stikkes ned i blindtarmsavføringen, dreies rundt og tas ut igjen på en slik måte at noe materiale følger med bomullspinnen (**ikke bruk bomullspinnene som en spade, slik at altfor mye avføring kommer ned i glasset**).

Bomullspinnen stikkes deretter umiddelbart ned i prøveglasset, pinnen må brytes av slik at lokket kan skrues godt på til slutt.

Dette gjøres 10 ganger godt fordelt utover hele huset. Samme prøveglass benyttes til alle 10 bomullspinnene.

Eksempler:

Blindtarmstømming:




Blindtarmstømming, men her er det også noe urat som ikke skal prøvetas:



Urat

IKKE blindtarmstømming, skal ikke prøvetas:

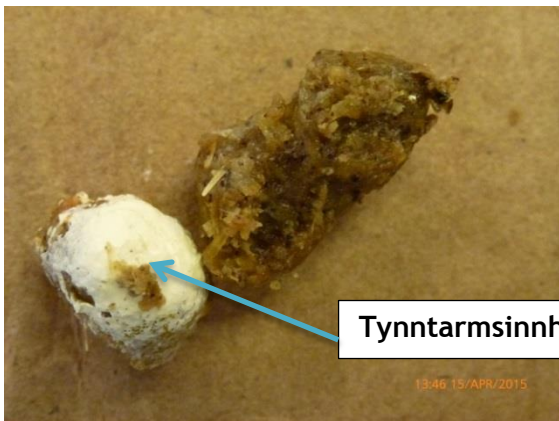

Tynntarmsinnhold med urat



Riktig prøvemateriale og mengde uttatt:



Riktig prøvemateriale, men litt lite:



For lite, flere pinner uten synlig avføring:



Eksempler på feil prøvemateriale:

Svabrene plassert feil vei i røret:



Uegnet prøvemateriale; fjær, strø, urart etc.



For mye og feil prøvemateriale:

